

**ПАСПОРТ  
 ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ  
 (ЛК-400 ШГ, ЛК-800 ШГ)  
 ГОСТ 16371-93**



ЛК-800 ШГ



ЛК-400 ШГ

**1 Назначение и конструкция**

- 1.1. Шкаф гардеробный предназначен для использования в лабораториях различного профиля.
- 1.2. Шкаф ЛК-800 ШГ имеет два варианта исполнения:
  - из листового металла с полимерным покрытием
  - из ЛДСП, торцы обработаны кромкой ПВХ.
 Корпус устанавливается на разборный металлический каркас с полимерным покрытием.
- 1.3. Шкаф ЛК-400 ШГ имеет один вариант исполнения:
  - из ЛДСП, торцы обработаны кромкой ПВХ.
 Корпус устанавливается на разборный металлический каркас с полимерным покрытием.
- 1.4. Шкаф ЛК-800 ШГ имеет две распашных двери ЛК-400 ШГ одну дверь, полку для головных уборов и штангу для вешалок.

*Допускаются изменения и дополнения в перечне используемых материалов.*

**2 Основные технические данные**

Модель	Ширина	Глубина	Высота
ЛК-400 ШГ	400	450	1950
ЛК-800 ШГ	800	450	1950

**3 Комплект поставки**

№	1	2	3	4	5	6	7
Наименование	Разборный металлический каркас	Корпус шкафа с дверцами	Заглушка с резьбой М10 25x25	Опора резьбовая М10	Саморез 4x35(ЛДСП) /Саморез с буром 4,2x38(сталь)	Болт М8x40 мм	Шайба М8
							
	1 шт.	1 шт.	3 шт. (Установлено в каркасе)	4 шт.	6 шт.	4 шт.	4 шт.

**\*Дополнительная комплектация**

- замок (только для шкафов из ЛДСП);
- доводчики - для "мягкого" закрывания дверей (только для шкафов из ЛДСП).

## 4 Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: ключ разводной, шуруповёрт.

- 4.1 Для сборки разборного каркаса необходимо (Рис. 1):
  - Вкрутить опоры в боковые рамы каркаса;
  - Прикрутить боковые рамы к верхней при помощи болтов М8х40.
- 4.2 Освободить изделие от транспортной упаковки.
- 4.3 Установить изделие на каркас:  
Шкаф из Стали: Прикрутить каркас к корпусу шкафа, используя саморезы 4.2х38 (4шт) (Рис. 2).  
Шкаф из ЛДСП: Прикрутить каркас к корпусу шкафа, используя саморезы 4х35 (4шт) (Рис. 2).
- 4.4 Отрегулировать дверцы.
- 4.5 Выставить шкаф по уровню при помощи регулируемых опор.
- 4.6 Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату ввода в эксплуатацию.

## 5 Инструкция по обслуживанию.

- 5.1 Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.
- 5.2 В ежемесячный осмотр входит:
  - Визуальный осмотр;
  - Проверка на наличие царапин на каркасе, корпусе, полках шкафа;
  - Уборка пыли, грязи с полок, используя обычные моющие не абразивные средства. **Не допускается прямого контакта с водой** частей изделия изготовленных из ЛДСП (в противном случае возможно вспучивание и разбухание);
- 5.3 В ежегодный осмотр входит:
  - Ежемесячный осмотр;
  - Подкраска царапин на каркасе.
- 5.4 Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель»

## 6 Правила эксплуатации.

- 6.1 Шкаф гардеробный должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.
- 6.2 Шкаф необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия химических реагентов и их паров.
- 6.3 Нагрузка на полку шкафа не должна превышать 10 кг.

## 7 Сведения о транспортировке, упаковке, хранении.

- 7.1 Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50432-92 и «Рекомендаций по организации производства мебели и поставке ее торгующим организациям в разобранном виде» (гофрокартон для ламинированных деталей, полиэтилен для металлических рам).
- 7.2 Хранение в упакованном виде допускается в помещениях не содержащих паров кислот, щелочей, газов, вызывающих коррозию, при температуре окружающего воздуха от +1°C до +35°C и относительной влажности не более 80%.

## 8 Гарантийные обязательства.

- 8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей в течение 1000 и 1 дня, при соблюдении вышеуказанных правил ухода.
- 8.2 За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 8.3 Гарантийный срок исчисляется со дня отгрузки.
- 8.4 Если в течение гарантийного срока хранения будут обнаружены производственные дефекты, потребителем должен быть составлен акт установленного образца о необходимости ремонта, который направляется на организацию – изготовитель (продавец).
- 8.5 Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.

Рис. 1


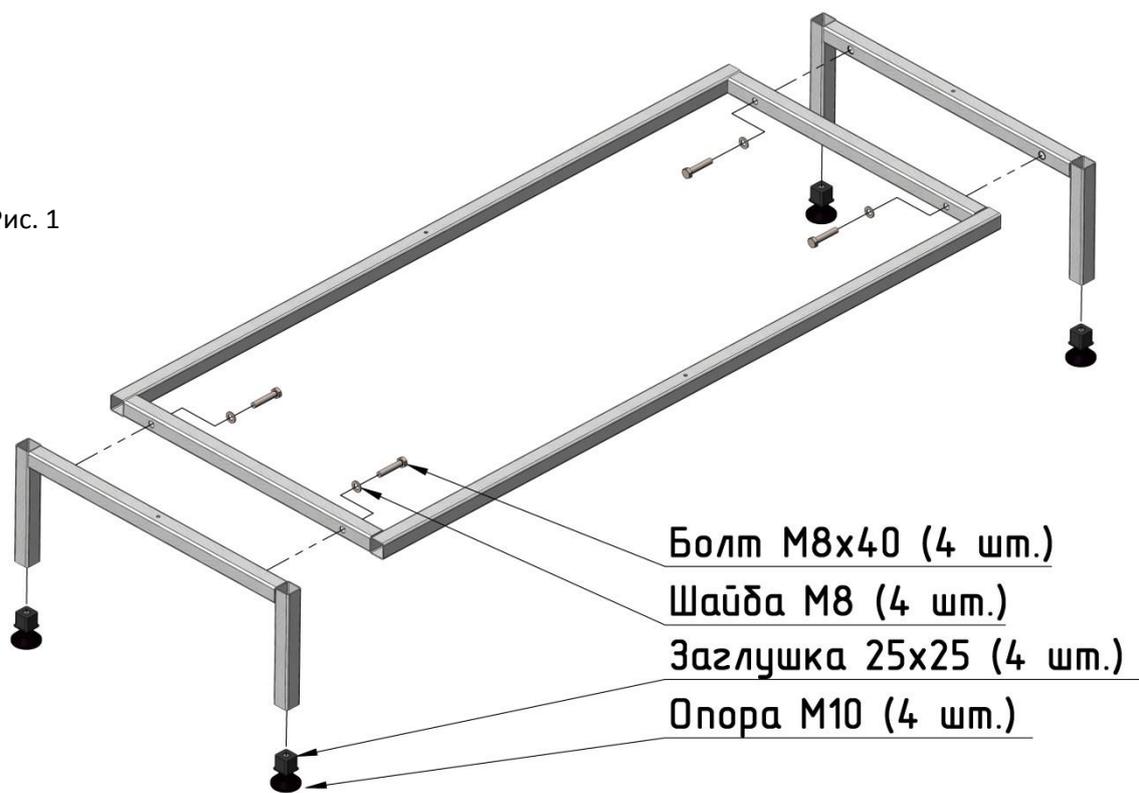


Рис. 2

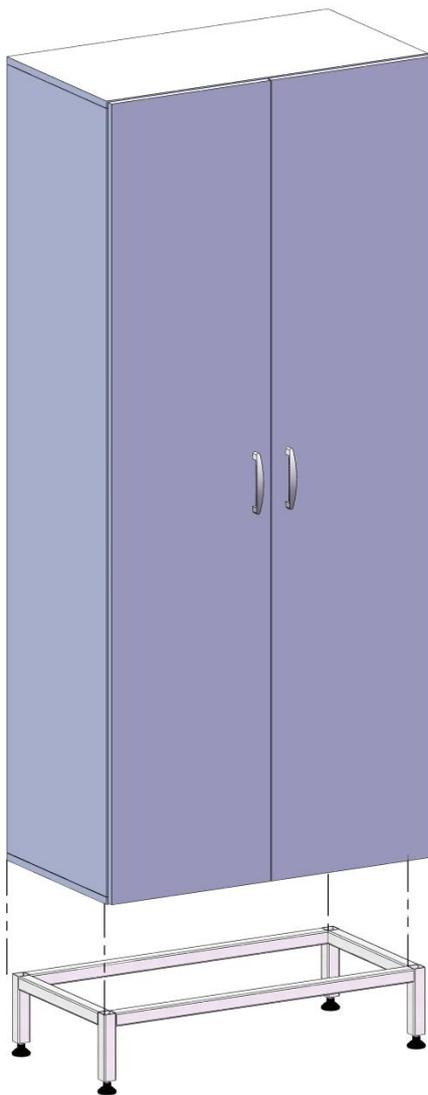

Свидетельство о приемке:

Шкаф для документов офисный ЛК-800 ШГ, ЛК-400 ШГ

Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и признан годным к эксплуатации

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ (подпись)

М.П. \_\_\_\_\_

Примечание: ООО «СпецБалтМебель» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделий без предварительного уведомления.

Сертификат соответствия РОСС RU. ДМ06. Н00475. Срок действия с 06.06.2014 по 28.05.2017 № 0841928

Орган по сертификации мебели РОСС RU. 0001.11ДМ06. Некоммерческое партнерство «СевЗапСтандарт». Сертификат выдан на основании протоколов испытаний №№ 121, 122 от 30.05.2014 г. ИЦ НП «СевЗапСтандарт», протокола лабораторных исследований № 21 от 29.05.2014 г. ИЦ Некоммерческое партнерство «СевЗапСтандарт» (атт. Аккредитации №РОСС RU.000121ДМ67).